研究用

TaKaRa

Premix Ex Taq[™] (Probe qPCR), ROX plus

说明书

目 录

内容	页 码
● 制品说明	1
● 试剂盒原理	1
● 制品内容	2
● 试剂盒外必备主要试剂和仪器	2
● 保 存	2
● 使用注意	2
● 操作方法	3
● Real-Time RT-PCR 的操作流程	6
● 关联产品	7

● 制品说明

本制品是采用探针法进行 Real Time PCR(qPCR)反应的专用试剂,可用于快速 PCR。*Premix Ex Taq* 是一种 2X 浓度的 Premix Type 试剂,进行实验时,PCR 反应液的配制十分方便简单。Mix 中添加了 Tli RNaseH(耐热性 RNase H),以 cDNA 作为模板进行 PCR 反应时,可以很好地抑制由于 cDNA 中残存mRNA 对 PCR 反应造成的阻害作用。制品中使用了添加了抗体的 Hot Start PCR 酶 *TaKaRa Ex Taq* HS,与 Takara 精心研制的 Real Time PCR 用 Buffer 组合使用,可以有效抑制非特异性的 PCR 扩增,大大提高 PCR 的扩增效率,进行高灵敏度的 Real Time PCR 扩增反应。

本制品可以在宽广的定量区域内得到良好的标准曲线,对靶基因进行准确定量、检测,重复性好,可信度高。

适用的 Real Time PCR 扩增仪

- ◆ 需要使用 ROX Reference Dye*1进行信号校正的仪器
 - · StepOnePlus Real-Time PCR System (Thermo Fisher Scientific)
- ◆ 不需要使用 ROX Reference Dye 进行信号校正的仪器
 - · Thermal Cycler Dice™ Real Time System III (Code No. TP950/TP970/TP980/TP990)
 - · Thermal Cycler Dice™ Real Time System // (Code No. TP900/TP960: 终卖)
 - · Thermal Cycler Dice Real Time System Lite (Code No. TP700/TP760: 终卖)
 - Smart Cycler II System (Cepheid) etc.
 - *1 对于Applied Biosystems 7500 Real-Time PCR System或7500 Fast Real-Time PCR System (Thermo Fisher Scientific),需要使用ROX Reference Dye II校正,推荐使用*Premix Ex Taq* (Probe qPCR),Bulk (Code No. RR390L)。

● 试剂盒原理

本制品利用 TaKaRa Ex Taq HS 进行 PCR 扩增反应,通过使用 Probe 对 PCR 扩增荧光信号强度进行检测。


PCR

本制品中的 DNA 聚合酶由于使用了 Hot Start PCR 酶 *TaKaRa Ex Taq* HS,从而抑制在调制反应液等低温条件下由引物产生的非特异性退火或引物二聚体引起的非特异性扩增,大大提高 PCR 扩增灵敏度。

荧光检出

使用 5[°] 端带有荧光物质(如:FAM 等),3[°] 端带有淬灭物质(如:TAMRA 等)修饰的寡核苷酸进行荧光检测的方法。

当 PCR 反应液中加入荧光探针后,在 PCR 反应的退火过程中,荧光探针便会和模板杂交。进一步在 PCR 反应的延伸过程中,Taq DNA 聚合酶的 5'→3'Exonuclease 活性可以分解与模板杂交的荧光探针,游离荧光物质发出荧光。通过检测反应体系中的荧光强度,可以达到检测 PCR 产物扩增量的目的。具体原理见下图。

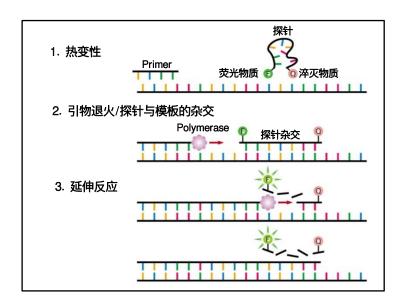

● 制品内容(50 µl反应×200次)

Premix Ex Tag (2X) (Probe qPCR), ROX plus*

5 ml

* 内含 TaKaRa Ex Tag HS, dNTP Mixture, Mg2+, Tli RNaseH 和 ROX Reference Dye。

● 试剂盒外必备主要试剂和仪器

- Real-Time PCR 扩增仪 (authorized instruments)
- aPCR 实验专用的离心管或反应板
- PCR 引物
- 检测用探针 (TaKaRa gPCR Probe, etc.)
- 灭菌水
- 微量移液器和枪头(高压灭菌,滤膜过滤)

● 保 存:

4℃保存(稳定性高达6个月)。

注意: 避光保存, 防止污染。

- 1. 使用前轻轻颠倒以确保试剂完全溶解并充分混匀。
- 2. 可在-20℃长期保存,一旦融解请于4℃保存并在6个月之内使用完。

● 使用注意

以下为使用本试剂盒时的注意事项,使用前一定认真阅读。

- 1. 使用前,请上下颠倒轻轻均匀混合,避免起泡,并经轻微离心后使用。如果试剂没有混匀,其反应性能会有所下降,不能使用振荡器混匀。*Premix Ex Taq*(2X)(Probe qPCR),于-20℃保存时容易形成沉淀,此时,室温(约30℃以下)短时间放置后,颠倒混匀可以完全溶解。确保试剂混合均匀后再使用。
- 2. 融解后的试剂请于冰上放置。
- 3. 本制品中不含有探针,请另行准备。
- 4. 反应液的配制、分装请一定使用新的(无污染的)枪头、Microtube 等. 尽量避免污染。
- 5. 本制品中使用的 *TaKaRa Ex Taq* HS 是利用抗 Taq 抗体的 Hot Start 用 DNA 聚合酶,与其他公司的 化学修饰型 Hot Start 用 DNA 聚合酶相比,不需要 PCR 反应前的 95℃、5~15 分钟的酶的活性化反 应。如果高温处理时间过长,会使酶的活性下降,其 PCR 的扩增效率、定量准确度等都会受到影响。 如果在 PCR 反应前进行模板的预变性,通常设定为 95℃、30 秒。

● 操作方法


◆ 应用 StepOnePlus Real-Time PCR System 的操作方法

1) 按下列组分配制 PCR 反应液(反应液配制请在冰上进行)。

试剂	使用量	终浓度
Premix Ex Taq (2X) (Probe qPCR), ROX plus	10 μΙ	1X
PCR Forward Primer (10 μM)	0.4 μΙ	0.2 μM ^{*1}
PCR Reverse Primer (10 μM)	0.4 μΙ	0.2 μM ^{*1}
Probe*2	0.8 μ1	
模板(<100 ng)*3	2 μΙ	
灭菌水	6.4 µl	
Total	20 μΙ	

- *1 通常引物终浓度为 $0.2~\mu\,M$ 可以得到较好结果。反应性能较差时,可以在 $0.1\sim1.0~\mu\,M$ 范围内调整引物浓度。
- *2 使用的探针浓度,与使用的 Real Time PCR 扩增仪、探针种类、荧光标记物质种类有 关,实际使用时请参照仪器说明书,或各荧光探针的具体使用要求进行。
- *3 在 20 μ I 反应体系中,DNA 模板的添加量通常在 100 ng 以下。因不同种类的 DNA 模板中含有的靶基因的拷贝数不同,必要时可进行梯度稀释,确定理想的 DNA 模板添加量。如果欲使用本制品进行 2 Step RT-PCR 反应的第二步 PCR 扩增反应,第一步的 RT 反应液作为 DNA 模板时的添加量不要超过 PCR 反应液总体积的 10%。
- 2) 进行 Real Time PCR 反应。

建议采用下列图表显示的两步法 PCR 反应程序,如果该程序得不到良好的实验结果时,再进行 PCR 条件的优化。有关 PCR 的具体反应条件请参照「PCR 反应条件概述」。

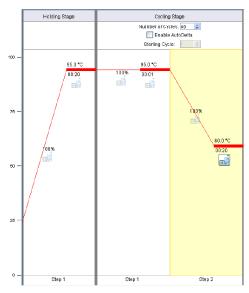

两步法PCR扩增标准程序:

Fast 操作流程:

Holding Stage

Number of Cycles: 1 Step1: 95°C 20 sec

Cycling Stage

Number of Cycles: 40 Step1: 95°C 1 sec Step2: 60°C 20 sec

3) 实验结果分析。

反应结束后确认 Real Time PCR 的扩增曲线,进行 PCR 定量时制作标准曲线等。分析方法参见仪器的操作手册。


◆ 应用 Thermal Cycler Dice Real Time System III (// and Lite: 终卖)

1) 按下列组分配制 PCR 反应液(反应液配制请在冰上进行)。

试剂	使用量	终浓度
Premix Ex Taq (2X) (Probe qPCR), ROX plus	12.5 µl	1X
PCR Forward Primer (10 μM)	0.5 μΙ	0.2 μM ^{*1}
PCR Reverse Primer (10 μM)	0.5 μ1	0.2 μM ^{*1}
Probe*2	1 μΙ	
模板(<100 ng)* ³	2 μΙ	
灭菌水	8.5 µI	
Total	25 μΙ	

- *1 通常引物终浓度为 0.2 μ M 可以得到较好结果。反应性能较差时,可以在 0.1~1.0 μ M 范围内调整引物浓度。
- *2 使用的探针浓度,与使用的 Real Time PCR 扩增仪、探针种类、荧光标记物质种类有关,试剂使用时请参照仪器说明书或各荧光探针的具体使用要求进行。使用 Thermal Cycler Dice Real Time System II (// and *Lite*: 终卖)时,通常探针终浓度在 0.1~0.5 μ M 范围内进行调整。
- *3 在 25 μl 反应体系中,DNA 模板的添加量通常在 100 ng 以下。因不同种类的 DNA 模板中含有的靶基因的拷贝数不同,必要时可进行梯度稀释,确定理想的 DNA 模板添加量。如果欲使用本制品进行 2 Step RT-PCR 反应的第二步 PCR 扩增反应,第一步的 RT 反应液作为 DNA 模板时的添加量不要超过 PCR 反应液总体积的 10%。
- 2) 进行 Real Time PCR 反应。

建议采用下列图表显示的两步法 PCR 反应程序。退火/延伸时间可在 20~30 秒范围内进行调整,推荐使用 30 秒的条件。有关 PCR 的具体反应条件请参照「PCR 反应条件概述」。

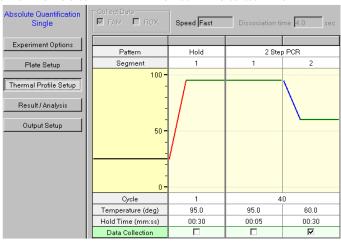

两步法 PCR 扩增标准程序:

Hold (预变性) Cycle: 1 95℃ 30 sec 2-Step PCR Cycle: 40 95℃ 5 sec 60℃ 30 sec

3) 实验结果分析。

反应结束后确认 Real Time PCR 的扩增曲线,进行 PCR 定量时制作标准曲线等。 分析方法请参见仪器的操作手册。


◆ 应用 Smart Cycler II System 的操作方法

1) 按下列组分配制 PCR 反应液(反应液配制请在冰上进行)。

试剂	使用量	终浓度
Premix Ex Taq (2X) (Probe qPCR), ROX plus	12.5 µl	1X
PCR Forward Primer (10 μM)	0.5 μΙ	0.2 μM* ¹
PCR Reverse Primer (10 μM)	0.5 μΙ	0.2 μM ^{*1}
Probe*2	1 µl	
模板(<100 ng)*3	2 μΙ	
灭菌水	8.5 µl	
Total	25 μΙ	

- *1 通常引物终浓度为 $0.2~\mu\,M$ 可以得到较好结果。反应性能较差时,可以在 $0.1\sim1.0~\mu\,M$ 范围内调整引物浓度。
- *2 使用的探针浓度,与使用的 Real Time PCR 扩增仪、探针种类、荧光标记物质种类有关,实际使用时请参照仪器说明书,或各荧光探针的具体使用要求进行。使用 Smart Cycler II System 时,通常在 0.1-0.5 µ M 范围内调整终浓度。
- *3 DNA 模板的添加量通常在 100 ng 以下。因不同种类的 DNA 模板中含有的靶基因的拷贝数不同,必要时可进行梯度稀释,确定理想的 DNA 模板添加量。如果欲使用本制品进行 2 Step RT-PCR 反应的第二步 PCR 扩增反应,第一步的 RT 反应液作为 DNA 模板时的添加量不要超过 PCR 反应液总体积的 10%。
- 2) 进行 Real Time PCR 反应。

PCR 反应管请用离心机轻轻离心后放入 Smart Cycler II System 中进行 Real Time PCR 反应。建议采用下列图表显示的两步法 PCR 反应程序,如果该程序得不到良好的实验结果时,再进行 PCR 条件的优化。有关 PCR 的具体反应条件请参照「PCR 反应条件概述」。

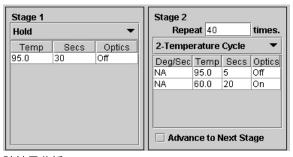

两步法 PCR 扩增标准程序:

Stage 1: 预变性

Hold

95°C 30 sec

Stage 2: PCR 反应

Repeat: 40 95°C 5 sec 60°C 20 sec

3) 实验结果分析。

反应结束后确认 Real Time PCR 的扩增曲线,进行 PCR 定量时制作标准曲线等。分析方法参见仪器的操作手册。

◆ PCR 反应条件概述

预变性

阶段	温度	时间	检测	备注
				通常情况下,即使模板是环状质粒或基因组
				DNA,预变性时使用 95℃ 30 秒钟即可,也
预变性	95℃	30 sec	关	可以依据模板情况适当延长变性时间到 1-2
				分钟。因变性时间过长可能会降低酶活性,
				所以不能超过2分钟。

二步法 PCR

循环数: 30-45 cycles

阶段	温度	时间	检测	备注
变性	95℃	3-5 sec	关	如果 Real Time PCR 目的片段长度低于 300 bp,则 95℃变性 3-5 秒钟即可。
退火/延伸	56-64°C	20-30 sec	开	请先尝试常规程序。如需优化温度,建议在 56-64℃范围内调整。如果反应效果不好, 可以适当延长反应时间。

● 进行 Real-Time RT-PCR 的操作流程

进行 Real Time RT-PCR 时,推荐结合以下试剂盒进行反转录反应。

- · PrimeScript RT reagent Kit (Perfect Real Time) (Code No. RR037Q/A/B)
- · PrimeScript RT Master Mix (Perfect Real Time) (Code No. RR036Q/A/B)
- · PrimeScript RT reagent Kit with gDNA Eraser (Perfect Real Time) (Code No. RR047Q/A/B) [实验例]

下面的实验例使用的是 PrimeScript RT reagent Kit (Perfect Real Time) (Code No. RR037Q/A/B)反转录反应后进行探针检测。

1. 按下列组分配制 PCR 反应液(反应液配制请在冰上进行)。

试剂	使用量	终浓度
5X PrimeScript Buffer (for Real Time)	2 μΙ	1X
PrimeScript RT Enzyme Mix I	0.5 μ1	
Oligo dT Primer (50 µM) *1	0.5 μ1	25 pmol
Random 6 mers (100 µM) *1	2 μΙ	200 pmol
Total RNA		
RNase Free dH ₂ O		
Total	10 μl ^{*2}	

*1 Random 6 mers 和 Oligo dT Primer 同时使用,可有效地将全长 mRNA 反转录成 cDNA。

使用单引物进行反转录时,使用量分别如下:

Random 6 mers (100 μ M) 2 μ I(200 pmol) Oligo dT Primer (50 μ M) 0.5 μ I (25 pmol) Gene Specific Primer (2 μ M) 0.5 μ I (1 pmol)

*2 反应体积可按需求相应放大,10 μI的反应体系可最大使用1 μg的 Total RNA。

2. 反转录反应条件如下:

37℃ 15 min*³ (反转录反应) 85℃ 5 sec (反转录酶的失活反应) 4℃

- *3 使用 Gene Specific Primer 时,建议反转录反应条件设置为 42℃ 15 min。PCR 反应有非特异扩增时,将温度升至 50℃会有所改善。
- 3. 请按照"操作方法"进行 PCR 反应。

● 关联产品

Probe qPCR Mix(Code No. RR391S/A/B)

Premix Ex Tag™ (Probe qPCR) (Code No. RR390Q/A/B)

Premix Ex Tag[™] (Probe gPCR), Bulk (Code No. RR390L/W)

PrimeScript™ RT reagent Kit (Perfect Real Time) (Code No. RR037Q/A/B)

PrimeScript™ RT reagent Kit with gDNA Eraser (Perfect Real Time) (Code No. RR047Q/A/B)

PrimeScript™ RT Master Mix (Perfect Real Time)(Code No. RR036Q/A/B)

One Step PrimeScript™ RT-PCR Kit (Perfect Real Time) (Code No. RR064A/B)

TB Green[®] *Premix Ex Taq*™ II (Tli RNaseH Plus) (Code No. RR820Q/A/B)

TB Green[®] Fast qPCR Mix (Code No. RR430A/B)

TB Green[®] Premix Ex Tag™ (Tli RNaseH Plus) (Code No. RR420Q/A/B)

Thermal Cycler Dice™ Real Time System III (Code No. TP950/TP970/TP980/TP990)

特别提示:本公司提供用于基因表达定量分析的引物探针设计合成服务。

本公司以美国 NCBI Data Base 上登录的 Human、Mouse、Rat、Cow、Dog、Chicken、Arabidopsis、Oryza 的 RefSeq 为对象,已经设计完成了各基因用于定量表达分析的 Real Time RT-PCR 用高特异性 Primer Set,此 Primer Set 适于本制品使用,可省略 PCR 反应条件优化实验。

注)本公司只对在本公司合成的引物/探针提供免费设计服务,恕不受理不在本公司合成的引物/探针的设计委托!

TB Green and *TaKaRa Ex Taq* are registered trademarks of Takara Bio Inc. *Premix Ex Taq*, Thermal Cycler Dice, and PrimeScript are trademarks of Takara Bio Inc.

注意

本产品仅供科学研究使用,不能用于人、动物的医疗或诊断程序,不能使用本产品作为食品、化妆品或家庭用品等。

未经Takara Bio Inc.书面许可授权或批准,不得制造、许诺销售、销售、进口Takara产品,或者使用Takara产品所有的相关专利及相关商标。

如果您需要其他用途的许可授权,请联络我们,或访问我们网站www.takarabio.com。

您使用本产品必须遵守产品网页上适用的全部许可要求。阅读、了解并遵守此类声明的所有限制性条款是您的责任。

所有商标均属于各自商标所有者的财产。某些商标并未在全部行政区注册。

本文件由宝日医生物技术(北京)有限公司翻译制作,最新版本文件请参考 Takara Bio Inc.网站。为正确使用 Takara 产品,您应当掌握本产品的相关知识和使用说明。

技术咨询热线:

0411-87641685, 87641686 4006518761, 4006518769

TAKARA BIO INC.

URL: https://www.takarabiomed.com.cn